

Initio® 2 : Des instruments de mesure polyvalents

Des appareils de mesure didactiques, simples et robustes

Les Initio® 2 disposent :

- d'un grand écran graphique rétroéclairé qui offre une très bonne lisibilité. Il vous permet de tracer des courbes en direct.
- d'une molette rotative : l'accès aux fonctions avancées se fait rapidement et surtout très intuitivement.
- d'une batterie longue durée compatible avec les chargeurs universels (micro USB).



Une fonction enregistrement de données

Les Initio® 2 possèdent une mémoire intégrée, ce qui vous permet de réaliser des sauvegardes de mesures au coup par coup ou en continu. Par la suite, vos données peuvent être traitées dans un tableur en les transférant sur un ordinateur par USB.




Utilisables avec vos consoles d'Ex.A.O.

Chaque Initio® 2 dispose de deux sorties analogiques pour vos acquisitions de données :

- deux fiches bananes 4 mm pour les interfaces d'Ex.A.O. disposant d'entrées directes
- une fiche Jack 3,5 mm pour l'enregistrement de données avec les appareils compatibles comme Groomy®

Quel que soit l'Initio® 2, les tensions de sorties sont identiques, simplifiant ainsi le paramétrage de l'expérimentation.

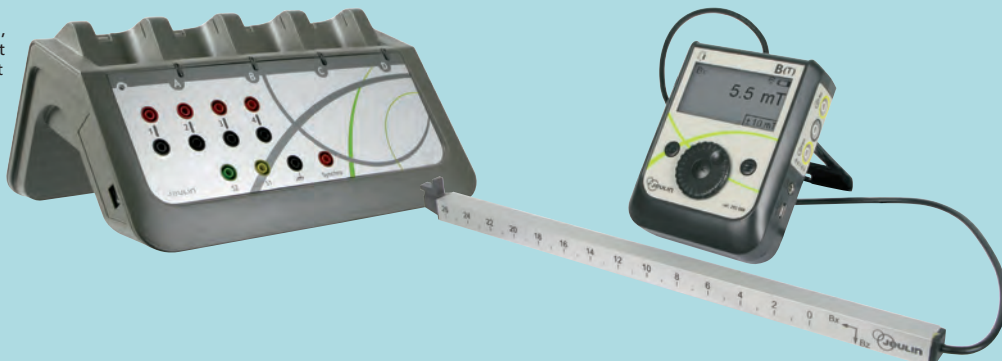

compatibles appareils mobiles



Compatibles avec toutes les tablettes, smartphones et ordinateurs portables

- Sans application à installer
- Compatibles avec tous les systèmes d'exploitation actuels
- Économiques : un Initio® 2* s'interface avec 5 appareils mobiles

Paramétrez vos acquisitions et affichez les mesures directement à l'écran d'une tablette, d'un smartphone ou d'un ordinateur portable (équipés Wifi) grâce au module Wifi pour Initio® 2 !

Sans application à installer, et compatible avec tous les systèmes d'exploitation actuels (iOS®, Android®, Windows®...), il est possible de partager à l'ensemble de la classe les résultats d'une expérience. En effet, plusieurs tablettes, smartphones ou ordinateurs portables peuvent se connecter sur un même Initio® 2 : jusqu'à 5 appareils mobiles (en fonction des conditions).

1. Insérez votre module Wifi pour Initio® 2 au dos de votre Initio® 2



2. Connectez-vous depuis votre appareil mobile au réseau Wifi créé par votre module. Puis, ouvrez votre navigateur Internet et entrez l'adresse indiquée sur votre module.



3. Visualisez les résultats de votre expérience !

Durant vos manipulations avec votre module Wifi pour Initio® 2, votre connexion Internet n'est pas disponible sur votre (vos) appareil(s) mobile(s).

Module Wifi pour Initio® 2

Réf. 451 470 31

* équipé de son module Wifi

Initio® 2 : Des instruments complets

Des fonctionnalités didactiques et pratiques



Conçu par
JEULIN

